

T-SToMA

newsletter nr 2 - december 2020

Het bedrijf T-SToMA, opgericht in 2017, is actief bij de distributie van tracheostomieproducten en revalidatie na een totale laryngectomie. T-SToMA heeft de ambitie om problemen met betrekking tot tracheostoma op te lossen. Ons bedrijf verdeelt deze producten aan in België en Luxemburg.

In deze vreemde tijden waarin we leven, waarin het vrijwel onmogelijk is om andere mensen te ontmoeten, is het belangrijk om de juiste communicatiemiddelen te gebruiken.

Wat is een betere manier om op de hoogte te blijven van onze activiteiten dan door snel een nieuwe uitgave van onze nieuwsbrief te bewerken? Onze ambitie is om vanaf nu ons aantal uitgaven te verhogen.

Bescherm uzelf!

Geconfronteerd met het gevaar van besmetting door het Coronavirus, proberen we allemaal onszelf en degenen die we ontmoeten, te beschermen. Het gebruik van een gezichtsmasker is in het dagelijks leven standaard geworden.

Maar hoe zit het met een persoon

We hebben veel nieuwe producten om aan u voor te stellen, zoals het SmartProtect-gezichtsmasker, de Simply Fix en verstelbare canulebevestiging, of de herbruikbare HME-cassettehouder, de PAD Connect.

In deze editie nodigen we u uit deze nieuwe producten te ontdekken en contact met ons op te nemen voor meer gedetailleerde uitleg.

die door een tracheostoma ademt? Hoe kan men de bescherming aanpassen?

De nek moet natuurlijk beschermd worden, maar af en toe, wanneer de situatie daarom vraagt, is het ook nodig om de neus en mond te kunnen bedekken.

WIJ BIEDEN U EEN EENVOUDIGE, EFFICIËNT EN COMFORTABEL OPLOSSING: de T-SToMA SmartProtect.

Meer informatie op pagina 2



COVID-19 Coronavirus

Het aantal mensen dat wereldwijd besmet is, blijft verhogen. We kennen nu allemaal de typische symptomen van deze nieuwe ziekte. Wetenschappers wijzen erop dat deze ziekte relatief onschadelijk is voor de overgrote meerderheid van gezonde mensen of voor jonge mensen.

In aanwezigheid van andere aandoeningen kan het virus echter veel ernstiger toeslaan. Voor ons is het belangrijk dat mensen met een laryngectomie alle nodige informatie krijgen. In de huidige situatie is er heel wat informatie,



soms beangstigend, soms verwarrend.

We raden u aan om uzelf te informeren bij uw zorgpersoneel, om betrouwbaar advies te krijgen en om officiële bronnen zoals www.info-coronavirus.be te raadplegen om u op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen van de pandemie.

ONZE PARTNERS

Onze belangrijkste partner is **Andreas Fahl**, een Duits bedrijf voor medische hulpmiddelen, reeds 25 jaar een speler op de markt. Ze ontwikkelen en produceren tracheotomie en laryngectomieproducten. Daarnaast vertegenwoordigen ze in enkele Europese landen het Amerikaanse **Blom-Singer** stemprothesesysteem.

FAHL

Blom-Singer
voice restoration systems

NIEUWE producten voor laryngectomie ...

Laryvox PAD Connect

Dit is een zelfklevende, herbruikbare HME-cassettehouder van medische siliconen, in huidskleur. Dit product maakt het mogelijk om, dankzij zijn kegelvorm, de ruimte op te vullen die ontstaat door een


diepe tracheostoma, waar het vaak moeilijk is om klevers aan te brengen.

De bolle kant past zich op een strakke manier aan rond de tracheostoma

en vergemakkelijkt daardoor het stemgebruik.

De HME-cassette past direct in de PAD Connect, er is geen extra klever nodig. Voor een nog betere hechting kunt u nog «Fahl Silicone Glue» toevoegen. Het «herbruikbare» aspect van dit product zou in bepaalde gevallen kunnen helpen om het probleem van het gebrek aan terugbetaling van klevers op te lossen.

Zoals altijd, het is de arts die kan bepalen voor wie dit product nuttig kan zijn.

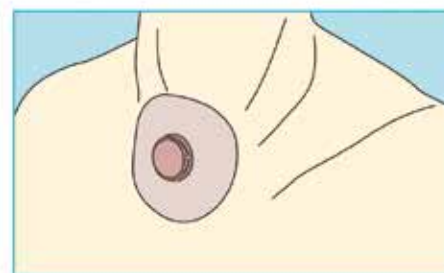


T-SToMA SmartProtect

Het ontwikkelde gezichts-/nekmasker vervaardigd door het bedrijf Maison Quincaillerie (www.m-qc.eu) is bedoeld om mensen te beschermen die door een tracheostoma ademen. Het masker, uitgerust met een gecertificeerd filter, wordt op de nek

geplaatst, maar kan op elk moment omhoog worden getrokken om de mond en neus te bedekken. De **SmartProtect** is gemaakt van jersey materiaal, licht elastisch en comfortabel om te dragen. Het gecertificeerde filter, 14 x 26 cm, wordt in tweevoud geleverd, wordt in de ruimte geplaatst waar de ademstroom doorheen gaat. Het is ongeveer tien keer wasbaar bij een temperatuur tot 60 ° C. Vanzelfsprekend is het **SmartProtect**-masker ook wasbaar op 60 ° C.

WASBAAR GECERTIFICEERD FILTER

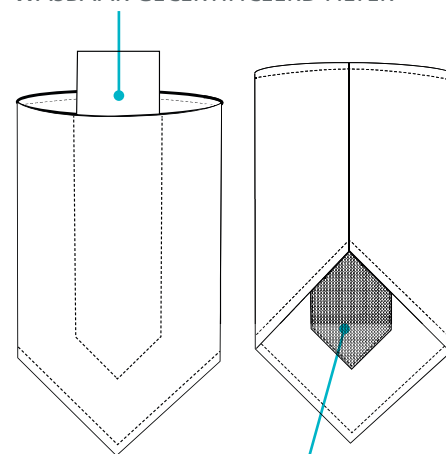

DE DUBBELE VOERING IN LICHTE STOF VOOR HET PLAATSEN VAN FILTER

Het bestaat in 4 kleuren:

zwart, marineblauw, lichtblauw en grijs.



REF.	DESCRIPTION
PROT-01	T-STOMA SmartProtect face mask - Black
PROT-02	T-STOMA SmartProtect face mask - Marine
PROT-03	T-STOMA SmartProtect face mask - Light Blue
PROT-04	T-STOMA SmartProtect face mask - Grey

Wij voorzien hem graag kosteloos (tot eind maart 2021) bij het bestellen van kits, maar kan ook apart besteld worden, rechtstreeks bij ons aan Euros 19, - exclusief verzendkosten.

Laryngotec PRO

Nieuwe laryngectomiecanule in ons assortiment. Dit sluit meer aan bij de vorm die gebruikers in ons land gewend zijn. Door de diepere kegelvorm past het beter en strakker op de tracheostoma.

De **Laryngotec PRO** canule is gemaakt van zeer flexibele siliconen en uiteraard voorzien van de 22 mm adapter om een HME-cassette of een spreekventiel in te brengen. Het wordt geleverd met een

comfortabele halsband, maar kan ook op zijn plaats worden gehouden met de **Laryvox Simply Fix**.

Er zijn twee versies, met of zonder vensters, in twee lengtes 55 en 36 mm en in 4 maten: 8, 9, 10 en 12.

De maat van de canule is gedrukt op het kegelvormige deel: zo is het niet nodig om deze te verwijderen om de dimensie te identificeren.



Laryvox Simply Fix



Ons productassortiment is onlangs aangevuld met een canuleclip, bestaande uit een paar stickers, die op de huid van de nek worden geplaatst en waarmee het buisje stevig kan worden bevestigd.

In tegenstelling tot andere producten van dit type op de markt.

De **Laryvox Simply Fix** blijft instelbaar eenmaal op de huid geplakt. De clips worden geleverd in per verpakking van 20 paar.


Accessoires

Onder de accessoires die we aanbieden **voor de verschillende merken van stemprothesen**, zijn er:

LARYVOX DUO BRUSH

Zeer praktisch klein bakje met 6 borstels voor het reinigen van een stemprothese.

De lengte van de borstel wordt gekozen in functie van de lengte van de prothese: 6 mm, 8 mm, 10 mm etc. Het andere uiteinde van de borstel dient om het gebied rond de stoma schoon te maken. Naast een spiegel, bevat het kleine doosje ook een «clip». Een zeer praktisch accessoire.

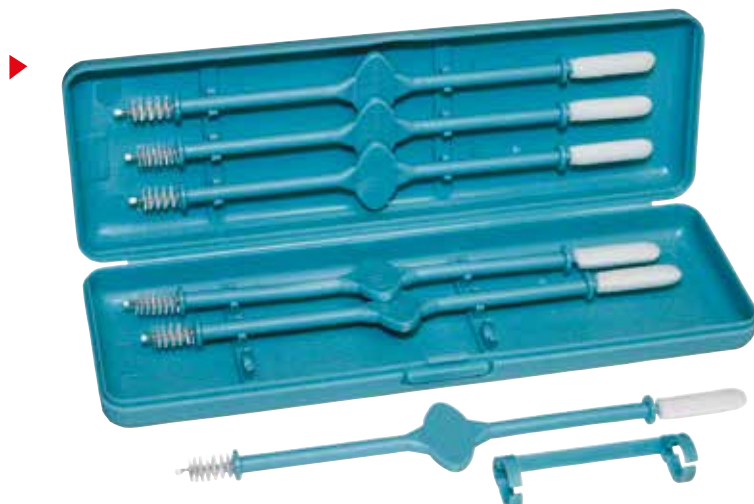

LARYVOX STOMALIGHT

Een ingenieus verlichtingssysteem bevestigd aan de borstel met de «clip»

voor een perfecte visualisatie van de prothese tijdens het reinigen.



LARYVOX PLUG

Stop voor stemprothesen, te gebruiken tussen het moment waarop de prothese lekkageproblemen begint te vertonen en het moment waarop vervanging mogelijk is.

HOE ONS TE CONTACTEREN?

Heeft u vragen voor ons?

Lees hieronder hoe u contact met ons kunt opnemen:



Hanane

Alle vragen met betrekking tot de dienst na verkoop, orderbeheer, leveringen, facturen
hanane@t-stoma.eu ou info@t-stoma.eu
Tel : +32 (0)2 660.62.30



Frank

Praktische vragen van patiënten over de zorg en het gebruik van onze producten, etc...
frankmeeus13@gmail.com
Tel : +32 (0)471 02.75.72



Joakim

Verantwoordelijk voor de Vlaamse regio
Vragen over producten, producttraining, etc...
joakim@t-stoma.eu
Tel : +31 6 46 20 49 53

Gabriela

Verantwoordelijk voor de Franstalige regio
Vragen met betrekking tot producten, bedrijfsbeheer, etc...
gabriela@t-stoma.eu
Tel : +32 (0)477 03.76.96

Specifiek probleem om op te lossen?

Aarzel niet om gebruik te maken van onze zeer lange ervaring met de problematiek van laryngectomie.

Ben je gelaryngectomeerd met een specifieke vraag of heb je advies nodig of een demonstratie?

Aarzel niet om contact op te nemen met **Frank**, die zelf gelaryngectomeerd is, hij heeft een uitstekende aanleg voor het oplossen van kleine problemen in het dagelijks leven.

Heeft u als arts of logopedist productadvies nodig in een specifiek geval met betrekking tot een van uw patiënten?

Joakim (actief op het gebied van laryngectomie sinds 1995) en **Gabriela** (actief sinds 1988) staan voor je klaar!

Een vergadering kan eenvoudig worden geregeld via WhatsApp, Skype of ander soortgelijk communicatiekanaal. We oefenen dit soort virtuele ontmoetingen al een tijd uit met wederzijdse tevredenheid.

T-SToMA

Akenkaai 69 - 19G
1000 Brussel

Tel. 02 660 62 30
E-mail: info@t-stoma.eu

www.t-stoma.eu



Wenst u meer informatie over ons en onze producten te ontvangen?

Contacteer ons telefonisch op 026606230 of per e-mail op info@t-stoma.eu. Als u op de hoogte gehouden wilt worden vul dan deze coupon in en stuur het per post, e-mail of schrijf deze informatie eenvoudig in een e-mail met deze zin «Ik ga akkoord dat de opgegeven informatie...»

Naam _____

Voornaam _____

Mijn telefoonnummer _____

Mijn e-mail adres _____

Naam van het ziekenhuis _____

Newsletter Per e-mail

Per post

Ik ga akkoord dat de opgegeven informatie kan worden bijgehouden, verwerkt en gebruikt worden door het bedrijf **T-SToMA** voor e-mailadvertenties en telefonisch contact en marktonderzoek. Dit akkoord is vrijwillig en kan worden stopgezet door een e-mail te sturen naar info@t-stoma.eu.